

安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ PLATZ(プラッツ)総合カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しております。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組合せ」以外の組合せを原因とする事故
(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組合せ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製品のお求め、お問い合わせは

製造元

株式会社 **プラッツ**

- 本社 / 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
本社ショールーム TEL.092-584-3434 FAX.092-584-3436
- 関東支店 / 〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031
- 東北営業所 / 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29(ホワイトアーバンシティ102)
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062
- 東海支店 / 〒485-0082 愛知県小牧市村中足中代927
TEL.0568-42-0588 FAX.0568-42-0539
- 関西支店 / 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
関西ショールーム メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107
- 九州支店 / 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
(本社内) TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

◎ホームページ <http://www.platz-ltd.co.jp/>

※ご意見・ご質問などは iken@platz-ltd.co.jp

カタログ定価315円(本体:300円+消費税)

1011FH 00055

TOTAL CATALOGUE 2011 VOL.1

PLATZ

プラッツ2011 総合カタログ 第1版

プラッツは、
電動介護ベッドを通じ
日本の福祉に貢献します。





プラッツはいつも「一生懸命」です。



代表取締役社長 福山 明利

現在多くの要介護状態の方々は、戦後の復興期において大変なご苦勞を経験されながら、弛まぬ努力で現代の日本の発展に貢献されてこられた方々です。

我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事であると考えます。

プラッツはこれからも常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護用ベッドを「一生懸命」造り続けます。

介護用ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じていただけることを最大の目標に恒久的に社会に貢献するものである。

プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

品質への取組

- 製造委託工場を厳選し、委託工場との協力・信頼関係を築き、レベルの高い製造工程を実現しています。
- 私たちは、製品に対する全工程に責任を持っています。

- ①企画・設計 ③生産工程指導
- ②調達部品検査指導 ④工程/製品の検査や工員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

- ISO 9001:2008の規格に基づき、愚直に品質の向上に努めています。
2007年5月11日取得
2010年5月11日更新




※UKASとは、United Kingdom Accreditation Serviceの略称

- 在宅用介護用電動ベッドのJIS規格JIS T 9254:2009を在宅介護ベッド「ミオレットシリーズ」、ベッド用グリップ「PZR-116J」「PZR-AT116J」、サイドレール「BG-53J」「BG-75J」「BG-96J」で取得しました。

取得には、国が定めた認証期間による「工場の品質体制」と「製品試験」の審査が必要です。



品質概略図

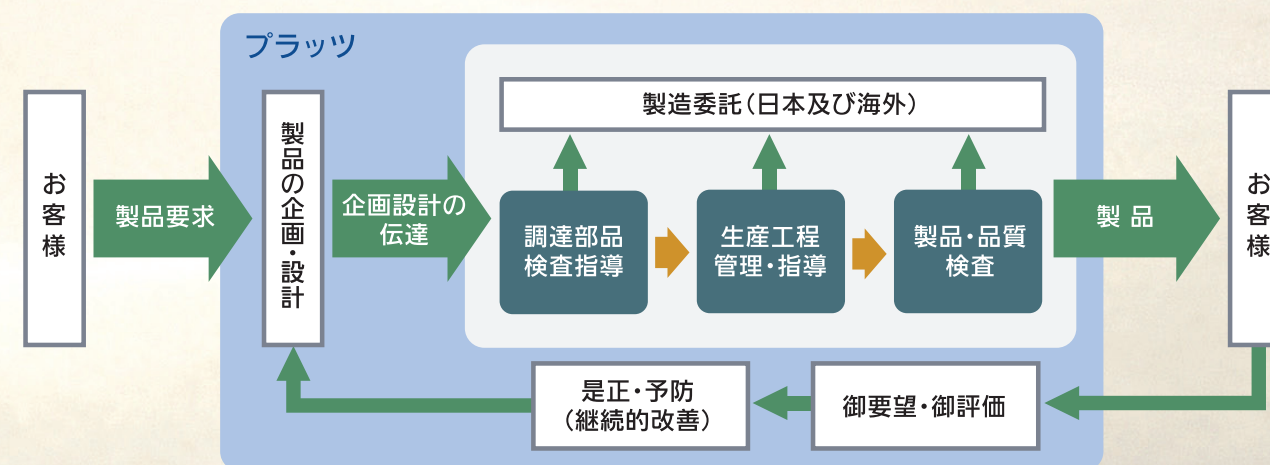

会社概要

【名称】株式会社プラッツ 英文名(PLATZ CO.,LTD)

【設立】1992年7月

【資本金】2億8,575万5,000円(2010年11月現在)

◎ホームページ <http://www.platz-ltd.co.jp/>

【営業拠点】

- ◆ 本社/本社ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3434 FAX.092-584-3436
- ◆ 関東支店
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031
- ◆ 東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
(ホワイトアーバンシティ102)
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062
- ◆ 東海支店
〒485-0082 愛知県小牧市村中足中代927
TEL.0568-42-0588 FAX.0568-42-0539
- ◆ 関西支店/関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107
- ◆ 九州支店(本社内)
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

【工場(品質検査)・物流拠点】

- ◆ 福岡工場・福岡倉庫
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-24
- ◆ 大和倉庫
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2500番地
日本トランスシティ(株) 大和倉庫 内
- ◆ 朝明倉庫
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松1515-1番地
日本トランスシティ(株) 朝明倉庫 内

【海外拠点】

- ◆ プラッツベトナム駐在員事務所
ベトナム、ホーチミン市

	ページ
■ 会社概要／開発・品質について	1
■ プラッツ電動ベッドの選び方	4
■ 自立支援電動ベッド「ケアレットシリーズ」	5
●ケアレット ●ケアレット・ネオ ●ケアレット用周辺機器	
※ベッド用グリップの装着はできません。	
■ 自立支援介護用電動ベッド「プリモレット」	11
■ 介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド（JIS認証ベッド） 「ミオレットシリーズ」	13
■ 施設用低床電動ベッド「アルティレットシリーズ」	19
■ 介護ベッド用マットレス etc.	23
●医療介護用マットレス ●床ずれ防止/体圧分散マットレス	
■ ベッド周辺機器	27
●ベッド用グリップ ●サイドレール ●テーブル ●キャスター ●アジャスター ●その他周辺機器	

お元気な方～介護5の方用の
ページ順になっております。

■ 隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、下記条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。

- ①レール間、レールとボード間の隙間が4～23.5cmでないこと。
(レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味)
- ②プラッツが指定するプラッツ製品の組合せであること。

■ 隙間適合マークの目的

- ①利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組合せのベッドを無くす事が最大の目的である。
- ②このマークを配布することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかる。

但し、隙間適合マーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。




ベッドに関する「非課税」の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(最新改正：平成20年4月30日厚生省告示第300号)】より

特殊寝台

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。

イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
ロ サイドレールが取り付けられているもの又は取り付け可能なもの
ハ キャスターを装着していないもの

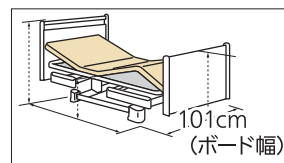

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。
「非課税」マークがある商品の本体幅は全て100cm以下です。


※「非課税」対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。

※「非課税」のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入されると、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで「非課税」となります。

※体圧分散マットレスなど特殊な物は非課税にはなりません。

お元気な方からご利用いただけるよう、 使いやすく安全なベッドをご用意しています。

〈モーターの数と対象者の基本相関図〉

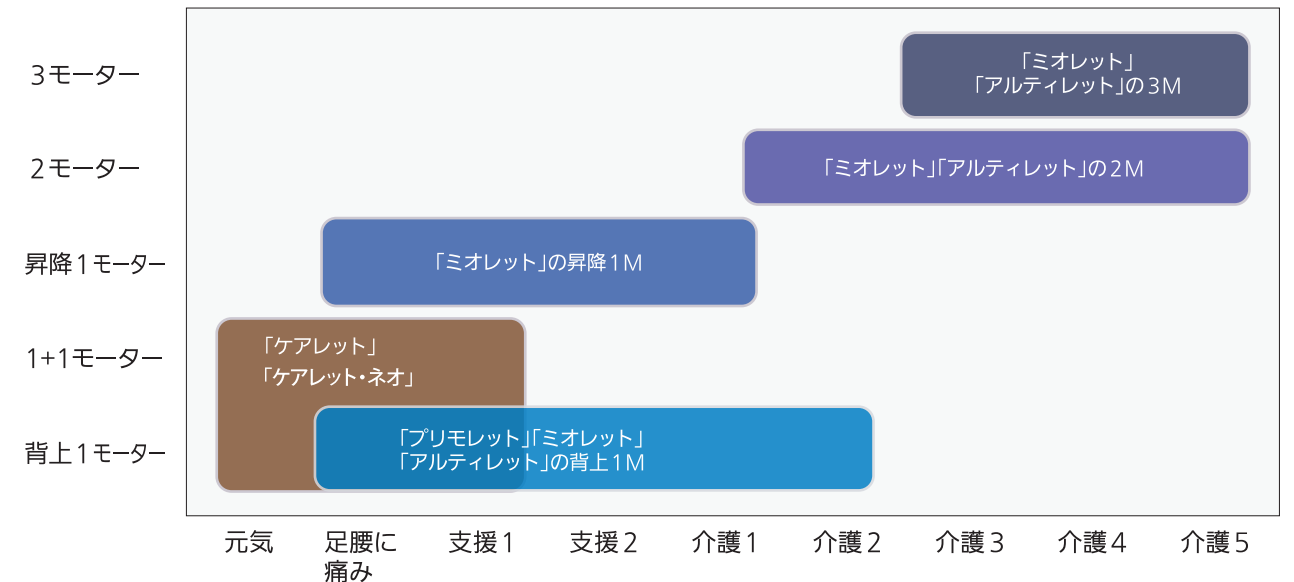

腰や首に痛みがあり、起き上がりが不安な方

背上げと膝上げを連動でき、起き上がりやすい体勢をつくってくれる背上げ1モーターベッド。



起き上がりが不安、血流が良くない方

2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節できる1+1モーターベッド。



腰や膝に痛みがあり、立ち上がりが不安な方

電動でベッドの高さを調節出来る昇降1モーターベッド。



起き上がり、立ち上がりのどちらも不安な方

背上げと膝上げを連動。さらに電動でベッドの高さを調節できる2モーターベッド。



ほとんど寝たきりに近い方

背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節可能。さらに高さも調節できる3モーターベッド。



その他

全機種 発火対策プラグを採用しています。



角度表示について

カタログ中の角度は、JIS規格の傾斜角度表示に則り、角度表示は許容差±(プラスマイナス)表示ではなく、最低限確保できる角度表示にしています。

例：背上げ70°とは、73°±3°の意味。



マットレスの硬さ表示について

1から4までの4段階表示。1が最も硬い事を表します。(当社基準)



Carelet

ケアレット

Carelet: 英語でお世話する「Care」とイタリア語でベッドを意味する「Letto」を組み合わせた造語です。

16種類の組合せ

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。
組合わせはP10を参照ください。

銘木の木目を活かした美しいデザインと
安全性を両立したベッドです。



特徴


- マットレスは専用の「エクレヴシリーズ」(P9)の3タイプから選べます
- 背が高い人を対象にしたロングタイプを用意
※対応するマットはエルダーサポートタイプのみ
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造 (P8写真参照)
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP9参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
- 表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ

ボード面に伝統技法(矢貼り)で貼合わせた天然木の突き板を採用! 一台一台の木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

矢貼り
希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見える伝統的な技法です。



サイドレールは標準装備(2本組)

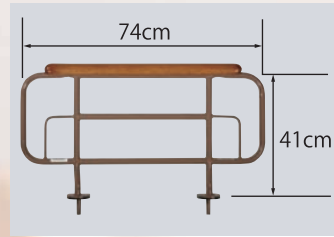

オプションで追加購入可能
PSG-740AW-T(2本組)
オープン価格
■JANコード/4539940081290
※ベッド用グリップの装着不可

PSB-FS1MAWS
「エルダーサポートワイドマットレス」とのセット例

機能

● 背上げ1モーターと1+1モーター



手元
スイッチ

1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。



手元
スイッチ

背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

デザイン

● 宮付きタイプ



手元スイッチ掛け
フックバー付き(宮付タイプ)


● フラットタイプ




仕様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ

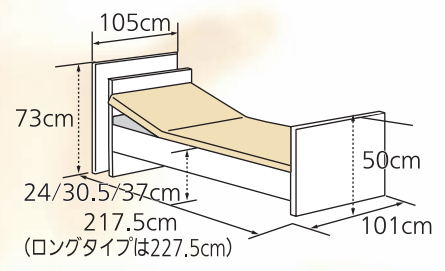

フラットタイプ

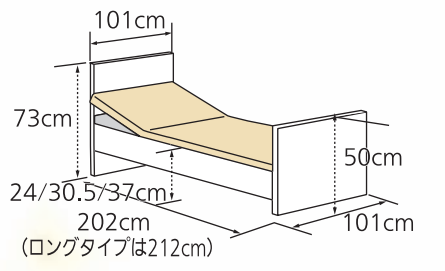

材質: スチール、MDF、天然木突き板
床面高: 24/30.5/37cmの3段階
定格消費電力: 45W(1M)、100W(1+1M)
電源: 100V(50/60Hz)
原産国: 1モータータイプ: ベトナム
1+1モータータイプ: マレーシア
※ベッド用グリップの装着不可


質量(サイドレール2本含む)
〈宮付〉1M: 86.7kg(ロングタイプ89kg)
1+1M: 78.8kg(ロングタイプ81.1kg)
〈フラット〉1M: 73.5kg(ロングタイプ75.8kg)
1+1M: 65.6kg(ロングタイプ67.9kg)
梱包: 3梱包 最大使用者体重: 90kg

ケアレット ネオ
CareLetneo
for your elder life

12種類の組合せ
ベッド+サイドレール+マットレスの
3点セットです。
組合せはP10を参照ください。



サイドレールは標準装備(2本組)

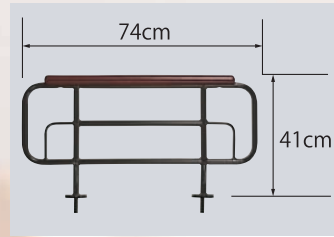

オプションで追加購入可能
PSG-740DW-T(2本組)
オープン価格
■JANコード/4539940081504
※ベッド用グリップの装着不可

PSB-KS1MA-CS
硬質ウレタンマットとの組み合わせ例

機能

●背上げ1モーターと1+1モーター



1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。



デザイン

●宮付きタイプ



小物入れの棚付

●フラットタイプ



多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド
洋室にも調和するデザイン

特徴

- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P9)の3タイプから選べます
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP9参照)
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能



●フリーホイール構造
背上げアームの回転により、背ボトムの「上がる」「下がる」をすることができます。
下がる時に、背ボトムに何かが挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイール構造により、これを回避できます。



「硬質ウレタンマットレス PSB-FW14(4/4)」と「バネ式昇降ベッドテーブル PZT-840」とのセット例

仕様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ	フラットタイプ
材質: スチール、MDF、天然木突き板	質量(サイドレール2本含む) 〈宮付〉1M: 92.8kg 1+1M: 84.9kg 〈フラット〉1M: 76.1kg 1+1M: 68.2kg
床面高: 24/30.5/37cmの3段階	梱包: 3梱包 最大使用者体重: 90kg
定格消費電力: 45W(1M)、100W(1+1M)	
電源: 100V(50/60Hz)	
原産国: 1モータータイプ: ベトナム 1+1モータータイプ: マレーシア	
※ベッド用グリップの装着不可	

“エクレーヴ”シリーズ 3つのマットレスから。

2層構造により適度の硬さと低反発のウレタンによるソフトな寝心地を追求、体圧分散効果にも優れたマットレスです。

エルダーサポートワイドマットレス

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。


※外カバーは取り外しできません。

標準タイプ用	ロングタイプ用
■JANコード/4539940060646	■JANコード/4539940060653
PSB-FS(4/4)	PSB-FSL(4/4)
オープン価格	オープン価格

- 材質/外カバー:ポリエステル 芯地:低反発ウレタン、ウレタン
- 寸法/幅97×厚さ13×長さ196cm(ロングは206cm)
- 質量/7.8kg(ロングは8.8kg)

※ベッドの床面高さは、37/43.5/50cmとなります。

ソフト
4
当社比

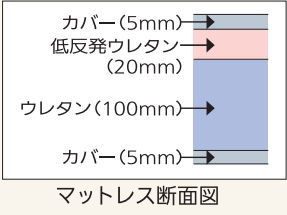

硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い「硬さと寝心地」を追求したマットレスです。

硬質ウレタンマットレス

- 普通のウレタンと硬質のチップウレタンの良さを生かしたやや硬めのマットレスです。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくなりました。

標準タイプ用

■JANコード/4539940060677


PSB-FW14(4/4) オープン価格

防臭 防ダニ 抗菌

- 材質/外カバー:ポリエステル 芯地:チップウレタン、ウレタン
- 寸法/幅96×厚さ14×長さ196cm
- 質量/15.3kg

※ベッドの床面高さは、38/44.5/51cmとなります。

ハード
2
当社比

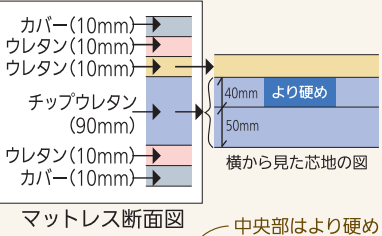

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、肌触りの良さと幅広い体重に適應した高級タイプのマットレスです。

ポケットコイルマットレス

- ポケットコイルとウレタンの良さを生かし体重30～90kgまで幅広い体重で体圧分散と適度の硬さを維持します。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくなりました。

標準タイプ用

■JANコード/4539940060660


PSB-FT18(4/4) オープン価格

防臭 防ダニ 抗菌

- 材質/外カバー:ポリエステル 芯地:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト
- ポケットコイル数:480個、線径:2.00mm
- 寸法/幅96×厚さ18×長さ196cm
- 質量/18kg

※ベッドの床面高さは、42/48.5/55cmとなります。

標準
3
当社比

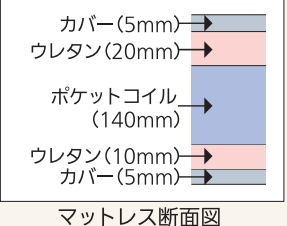

ソフト
4
当社比

数字が大きいほどソフトな寝心地になります。

※「ケアレット」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

セット型式 組合せ表

(3点セット:ベッド、サイドレール、マットレス)

価格は全セットオープン価格で非課税商品です。

非課税

ベッド本体					マットレス		
モデル	モーター	木部	サイズ		エルダーサポート PSB-FS/FSL(4/4)	硬質ウレタン PSB-FW14(4/4)	ポケットコイル PSB-FT18(4/4)
ケアレット	1M	フラット	標準	型式	① PSB-FS1FAWS	② PSB-FS1FA-CS	③ PSB-FS1FA-PS
			JAN	4539940072717	4539940073134	4539940073097	
		ロング	型式	④ PSB-FS1FAWLS			
			JAN	4539940072724			
		宮付	標準	型式	⑤ PSB-FS1MAWS	⑥ PSB-FS1MA-CS	⑦ PSB-FS1MA-PS
			JAN	4539940072694	4539940073141	4539940073103	
	1+1M	フラット	標準	型式	⑨ PSB-FS2FAWS	⑩ PSB-FS2FA-CS	⑪ PSB-FS2FA-PS
			JAN	4539940072755	4539940073158	4539940073110	
		ロング	型式	⑫ PSB-FS2FAWLS			
			JAN	4539940072762			
		宮付	標準	型式	⑬ PSB-FS2MAWS	⑭ PSB-FS2MA-CS	⑮ PSB-FS2MA-PS
			JAN	4539940072731	4539940073165	4539940073127	
ケアレット ネオ	1M	フラット	標準	型式	⑰ PSB-KS1FA-ES	⑱ PSB-KS1FA-CS	⑲ PSB-KS1FA-PS
				JAN	4539940073172	4539940073257	4539940073219
	宮付	型式		⑳ PSB-KS1MA-ES	㉑ PSB-KS1MA-CS	㉒ PSB-KS1MA-PS	
		JAN		4539940073189	4539940073264	4539940073226	
	1+1M	フラット		型式	㉓ PSB-KS2FA-ES	㉔ PSB-KS2FA-CS	㉕ PSB-KS2FA-PS
				JAN	4539940073196	4539940073271	4539940073233
宮付	型式	㉖ PSB-KS2MA-ES	㉗ PSB-KS2MA-CS	㉘ PSB-KS2MA-PS			
	JAN	4539940073202	4539940073288	4539940073240			

CareLet ケアレット 銀系入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

防臭 防ダニ 抗菌

ケアレット専用銀系ボックスカバー	銀系入りラッセルベッドパッド
<p>標準マット、ロングマット兼用です。</p> <p>【特徴】</p> <ul style="list-style-type: none">・5mm間隔で銀系を使用しています。・急速速乾作用によりカバーに付着した水分を素早く乾かします。・ご自宅洗濯できます。 <p>PCC-96</p> <p>メーカー希望小売価格 8,500円(税込)</p> <p>■材質/ポリエステル、銀系 ■JANコード/4539940081313</p>	<p>【特徴】</p> <ul style="list-style-type: none">・表面カバーには5mm間隔で銀系を使用。・ラッセルにより、マットとの間に空気層ができ、夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。・吸汗、速乾の生地を採用。・ご自宅洗濯できます。 <p>PKM-BP96</p> <p>メーカー希望小売価格 14,700円(税込)</p> <p>■材質/ポリエステル、銀系 ■寸法/幅96×長さ196cm ■JANコード/4539940081467</p>



自費レンタルベッドとしても使えるよう
2分割構造にした介護ベッド
＜ベッド用グリップを装着できるベーシックモデル＞



機能



手元
スイッチ

自立支援介護用1モーターベッド


■TAISコード/00631-000159 ■JANコード/4539940073295

PZB-ES1FA

メーカー希望
小売価格

120,000円 **非課税**

仕様

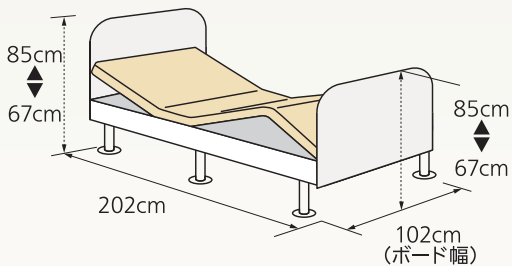

材 質	本体:スチール ヘッド・フットボード:プリント紙化粧繊維板 サイドパネル:天然木				
マットレス 適合寸法	幅88～90cm				
質 量	62.0kg	梱 包	3梱包	最大使用者体重	90kg
定格消費電力	50W	電 源	100V(50/60Hz)		
原 産 国	ベトナム	モーター部:ドイツLimoss社中国工場			

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ(cm)

	標準付属		別売オプション追加時			キャスターと延長脚					
延長脚	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14	7	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14
床面高	24	31	20.5	27.5	38	21	28	35	24.5	31.5	42

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。

特徴

- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造(P8写真参照)
- 床面高さは、20.5~38cmの5段階に調整可能(オプションの延長脚使用時、標準では24/31cmの2段階)
- ベッド用グリップなど介護用オプションを使用可能
- ワイヤーの装着で背膝連動も可能
- 本体は2分割でき搬入性を考慮



ベッド用グリップ「ニーパロ」等の装着例



2分割イメージ

立ち上がりや移乗をサポートするベッド用グリップも取付できます。

プリモレット専用周辺機器



高さ調節用14cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081559

PDP-140G(6pcs) メーカー希望小売価格 5,040円(税込)



高さ調節用7cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081566

PDP-70G(6pcs) メーカー希望小売価格 5,040円(税込)



高さ調節用3.5cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081573

PDP-35G(6pcs) メーカー希望小売価格 5,040円(税込)

ベッドの移動が多い方には、専用キャスターがおすすめです。



ロックタイプ×2個
フリータイプ×4個

プリモレット専用キャスター(6個組)

■TAISコード/00631-000160 ■JANコード/4539940081474

PPL-8CK6S(6pcs)

メーカー希望
小売価格

25,200円(税込)

※ベッドと同時購入の場合、全て課税となります。

その他のオプションはP23~30をご覧ください。

※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

MioLet

ミオレット

Miolet:イタリア語で「私のベッド=Mio letto」という言葉を短縮した造語

12種類の組合せ



フラットタイプ
写真はイメージです。

フィッティングで好評の「ミオレット」！
3モーター、2モーター、背上げ1モーター
そして昇降1モーター仕様の4タイプをラインナップ！

機能

3モーターベッド



レギュラータイプ ショートタイプ 宮付タイプ
PZB-M3RJ PZB-M3SJ PZB-M3RJ/M

2モーターベッド



レギュラータイプ ショートタイプ 宮付タイプ
PZB-M2RJ PZB-M2SJ PZB-M2RJ/M

昇降1モーターベッド



レギュラータイプ ショートタイプ 宮付タイプ
PZB-M1RJH PZB-M1SJH PZB-M1RJH/M

背上げ1モーターベッド



レギュラータイプ ショートタイプ 宮付タイプ
PZB-M1RJB PZB-M1SJB PZB-M1RJB/M


特徴



- 「メガネやティッシュケースなどの小物を置きたい!」というお客様の声を実現しました！
枕元にお薬やメガネなどを置くと、背上げた際に転げ落ちることがあり、これを防ぐことができます。



- 伝い歩きを考慮したボード形状。
住環境により、頭側・脚側のヘッド・フットボードを逆に取り付けることもできます。

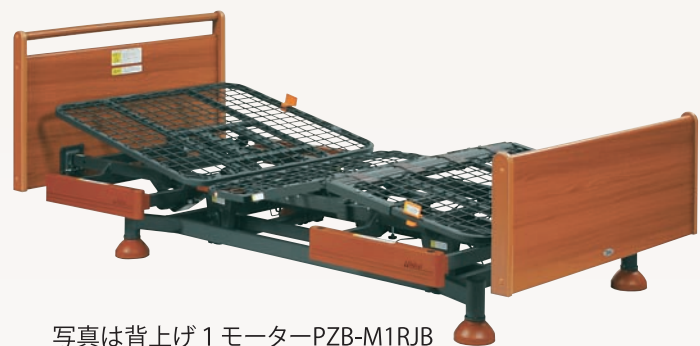

写真は背上げ1モーターPZB-M1RJB

- 低介護者を対象にした背上げ1モーターベッド「PZB-M1RJB」や昇降1モーターベッド「PZB-M1RJH」は、介護度に合わせて2モーター、3モータータイプにアップグレードが可能です。
- ショートタイプも背上げ1モーターから3モーターまで対応しています。
全長は195cmと狭い部屋にも対応。
マットレスは、PKM-9080S (P26参照) のみとなります。

JIS認証取得

在宅用介護用ベッドのJIS規格 (JIS T 9254:2009) の認証取得品。

対象製品

- 介護用電動ベッド 「ミオレット」
- ロングサイドレール 「BG-96J」
- 標準サイドレール 「BG-75J」
- ショートサイドレール 「BG-53J」
- ベッド用グリップ 「PZR-116J」
- ベッド用グリップ 「PZR-AT116J」



組合わせ例



介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド ミオレット

Point 1

利用者に合わせた脚部のフィッティングが可能。
対応機種: 3モーター/2モーター/背上げ1モーター

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。
ミオレットは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。

膝と脚ボトムの屈曲位置が合っていないと…痛い!

痛いからお尻をズラす
↓
床スレの元

※ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整!

適応身長 135~160cmの方
27cm

適応身長 160~175cmの方
32cm

適応身長 175cm以上の方
37cm

Point 2

1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。
対応機種: 2モーター/背上げ1モーター

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。
どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません!
バックオフ機能と合わせ、背上げ時の足方向へのズレが抑制され、家族の方の引き上げ介助の負担を軽減します。

背0° 膝6° 背20°~25° 膝14° 背45° 膝10° 背70° 膝0°

膝だけ上がる → 背上げ+膝上げ → 背上げ+膝下げ → バックオフ

端座位を取り易い膝0度

バックオフ機能付

対応機種: 3モーター/2モーター/背上げ1モーター

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。
また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

背上げ中に起きる背圧は放置すると呼吸困難になる恐れもあります。

簡単除圧!

※自分で体を動かす事ができない人のみ背圧が発生します。

仕様

3モーター/2モーター/昇降1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 102.5~68.5cm (210cm ショートは195cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 102.5~68.5cm (210cm ショートは195cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 102.5~68.5cm (223cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)

※昇降1モーターは、イラストのような背・膝のリクライニングは出来ません。

材 質	本体: スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード: プリント紙化粧板、天然木
床 面 高	25~59cm 専用キャスター〈M2RJ-8CKS〉装着時: +4cm
マットレス適合寸法	幅88~91cm 最大使用者体重 120kg
質 量	(3モーター: フラットタイプ) 91.5kg (3モーター: 宮付タイプ) 97.0kg (2モーター: フラットタイプ) 89.5kg (2モーター: 宮付タイプ) 95.5kg (昇降1モーター: フラットタイプ) 86.0kg (昇降1モーター: 宮付タイプ) 91.5kg ショートタイプは上記質量から1.0kg軽くなります。
梱 包	5梱包 原産国 ベトナム モーター部: ドイツLimoss社中国工場
電 源	100V 定格消費電力 120W

背上げ1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (223cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

材 質	本体: スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード: プリント紙化粧板、天然木										
床 面 高	29.0/32.5/36.0/39.5cmの4段階に設定可能(組立時) 標準で3.5/7cmの高さ延長脚が付属 専用キャスター〈M1RJB-8CKS〉装着時: +4cm										
標準付属延長脚の組み合わせと床面高さ(cm)	<table><tr><td>延長脚</td><td>無し</td><td>3.5</td><td>7</td><td>3.5+7</td></tr><tr><td>床面高さ</td><td>29</td><td>32.5</td><td>36</td><td>39.5</td></tr></table>	延長脚	無し	3.5	7	3.5+7	床面高さ	29	32.5	36	39.5
延長脚	無し	3.5	7	3.5+7							
床面高さ	29	32.5	36	39.5							
オプション延長脚との組み合わせと床面高さ(cm)	<table><tr><td>延長脚</td><td>14</td><td>3.5+14</td><td>7+14</td><td>14+14</td></tr><tr><td>床面高さ</td><td>43</td><td>46.5</td><td>50</td><td>57</td></tr></table>	延長脚	14	3.5+14	7+14	14+14	床面高さ	43	46.5	50	57
延長脚	14	3.5+14	7+14	14+14							
床面高さ	43	46.5	50	57							
マットレス適合寸法	幅88~91cm 最大使用者体重 120kg										
質 量	(フラットタイプ) 84.5kg (フラットショートタイプ) 83.5kg (宮付タイプ) 90.0kg										
梱 包	5梱包 原産国 ベトナム モーター部: ドイツLimoss社中国工場										
電 源	100V 定格消費電力 70W										

3モーターベッド

3モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 102.5~68.5cm (210cm ショートは195cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 102.5~68.5cm (210cm ショートは195cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 102.5~68.5cm (223cm) 84~50cm 100cm(ベッド幅)

■TAISコード/00631-000142 ■JANコード/4539940072991
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M3RJ

■TAISコード/00631-000176 ■JANコード/4539940073356
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M3SJ

■TAISコード/00631-000143 ■JANコード/4539940073004
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M3RJ/M

2モーターベッド

2モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (223cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

■TAISコード/00631-000140 ■JANコード/4539940072977
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M2RJ

■TAISコード/00631-000175 ■JANコード/4539940073349
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M2SJ

■TAISコード/00631-000141 ■JANコード/4539940072984
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M2RJ/M

昇降1モーターベッド

昇1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (223cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

■TAISコード/00631-000136 ■JANコード/4539940072939
メーカー希望小売価格 オープン価格
PZB-M1RJH

■TAISコード/00631-000173 ■JANコード/4539940073325
メーカー希望小売価格 オープン価格
PZB-M1SJH

■TAISコード/00631-000137 ■JANコード/4539940072946
メーカー希望小売価格 オープン価格
PZB-M1RJH/M

背上げ1モーターベッド

背1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ

レギュラータイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)
ショートタイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (210cm ショートは195cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

宮付タイプ

宮付タイプ: 83.0/79.5/76.0/72.5cm (223cm) 64.5/61.0/57.5/54.0cm 100cm(ベッド幅)

■TAISコード/00631-000138 ■JANコード/4539940072953
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M1RJB

■TAISコード/00631-000174 ■JANコード/4539940073332
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M1SJB

■TAISコード/00631-000139 ■JANコード/4539940072960
メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)
PZB-M1RJB/M


その他のオプションはP23~30をご覧ください。

15 PLATZ TOTAL CATALOGUE 2011 Vol.1

PLATZ TOTAL CATALOGUE 2011 Vol.1 16


事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記に規定された。

- ①レール廻りのAにおいて直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kg)で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
- ②レール廻りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kg)で押しても通過しないこと。
- ③レール廻りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

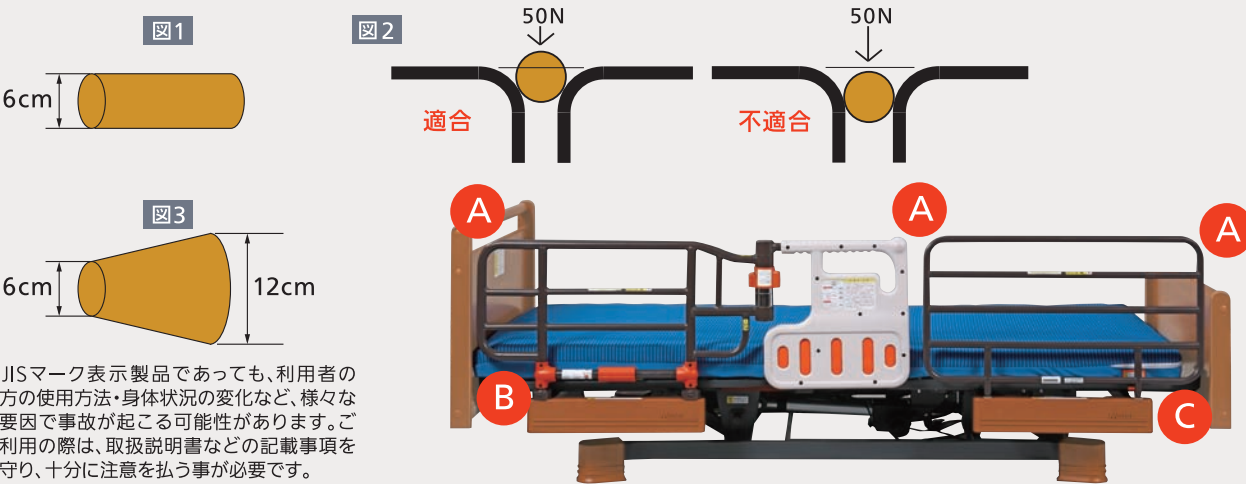


JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う必要があります。

ミオレットレギュラーサイズとベッド用グリップ、サイドレールの組み合わせ時の隙間

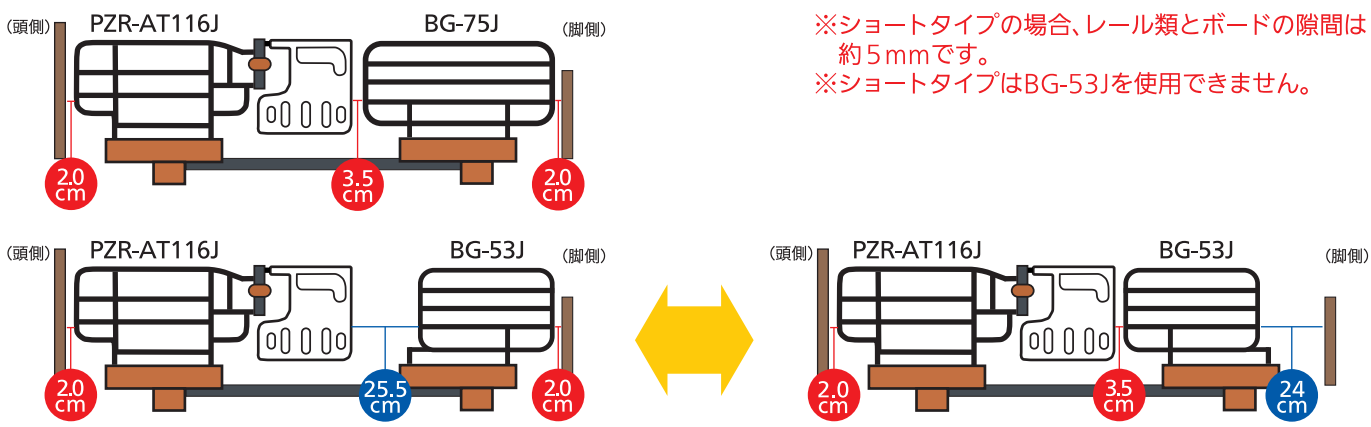


※ショートタイプの場合、レール類とボードの隙間は約5mmです。
※ショートタイプはBG-53Jを使用できません。


ロングサイドレールBG-96Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間

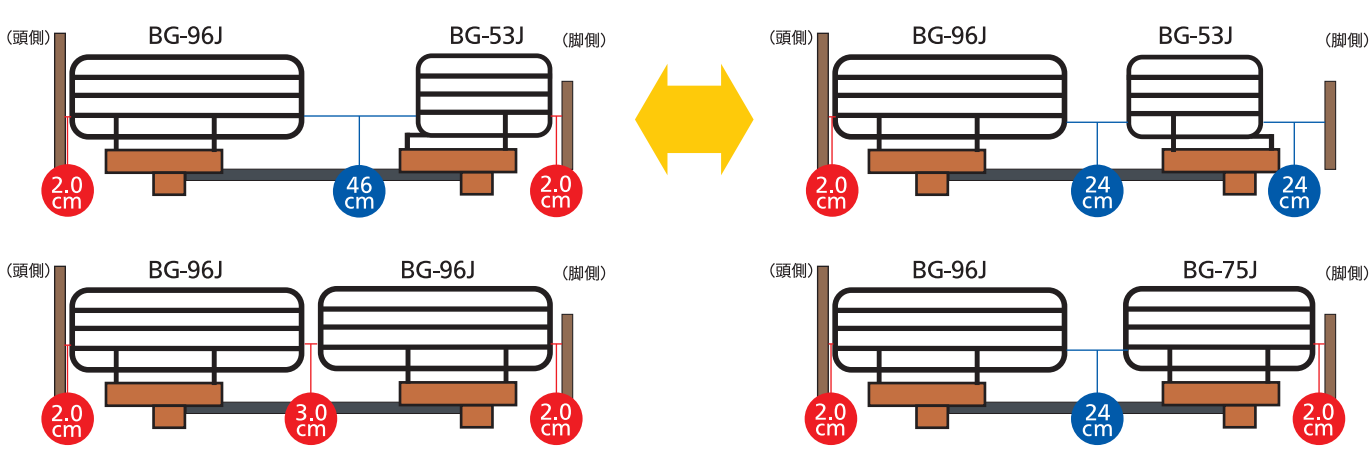

標準サイドレールBG-75Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間

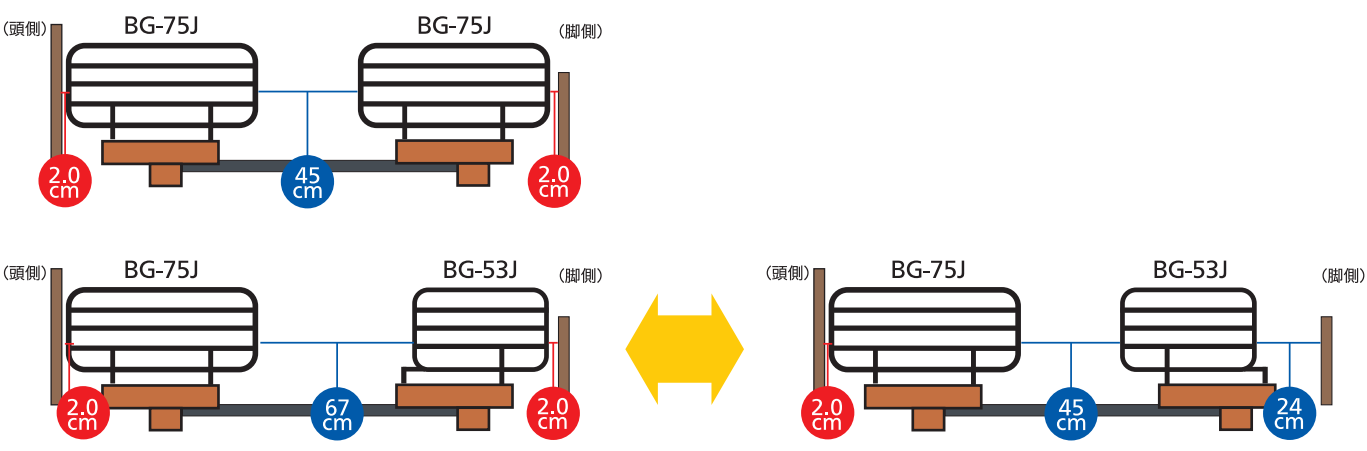

取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！

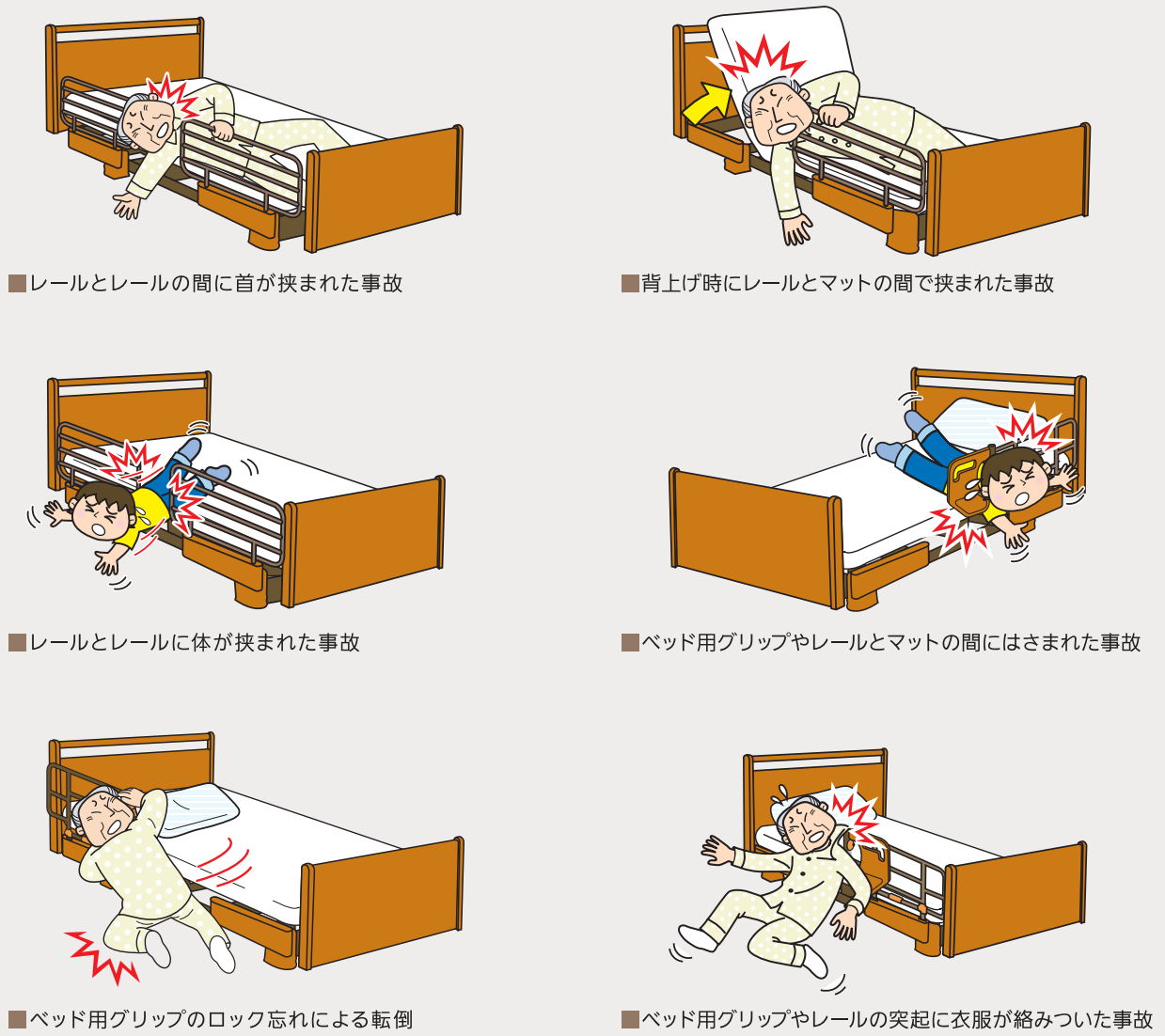

Ultilet
アルティレット

Ultilet:「Ultimate(アルティメット=英語で究極)」
と「Letto(レット=イタリア語でベッド)」という言葉
を組み合わせた造語です。

在宅介護ベッド「ミオレット」や介護予防機器「レスリハシリーズ」
での経験を生かした低床型電動ベッドです。

背上げ1モーターから3モータータイプまで
全12種類をご用意しました。



ダークブラウン

写真は3モーター用




固定脚仕様


対応機種:全機種

Point 1 利用者に合わせ脚部のフィッティングが可能。

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時に
お尻がずれてしまいます。
アルティレットは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで
脚ボトムの屈曲位置を調節できます。

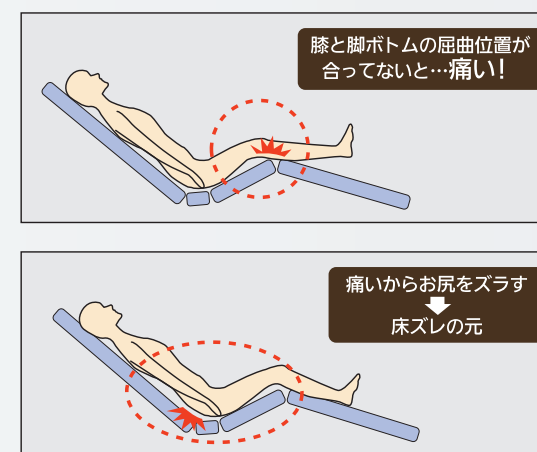

※ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整!

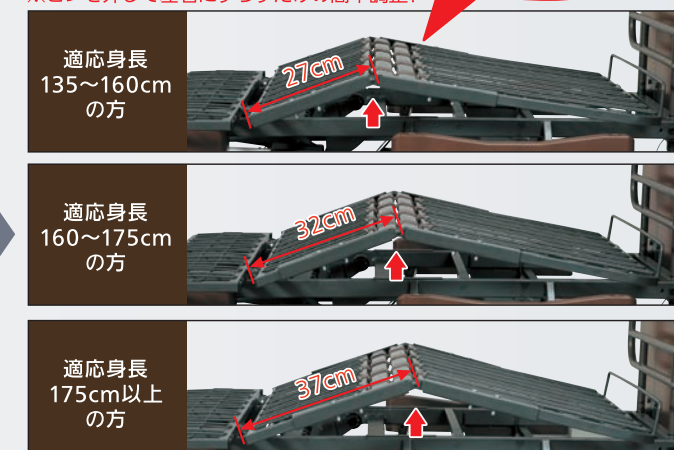

ライトブラウン


周辺機器との組合せ例

Ultilet アルティレット は「介護を受けられる方・される方」の究極のご満足を

Point 2 1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。

対応機種:2モーター/背上げ1モーター


背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように動作し、膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。

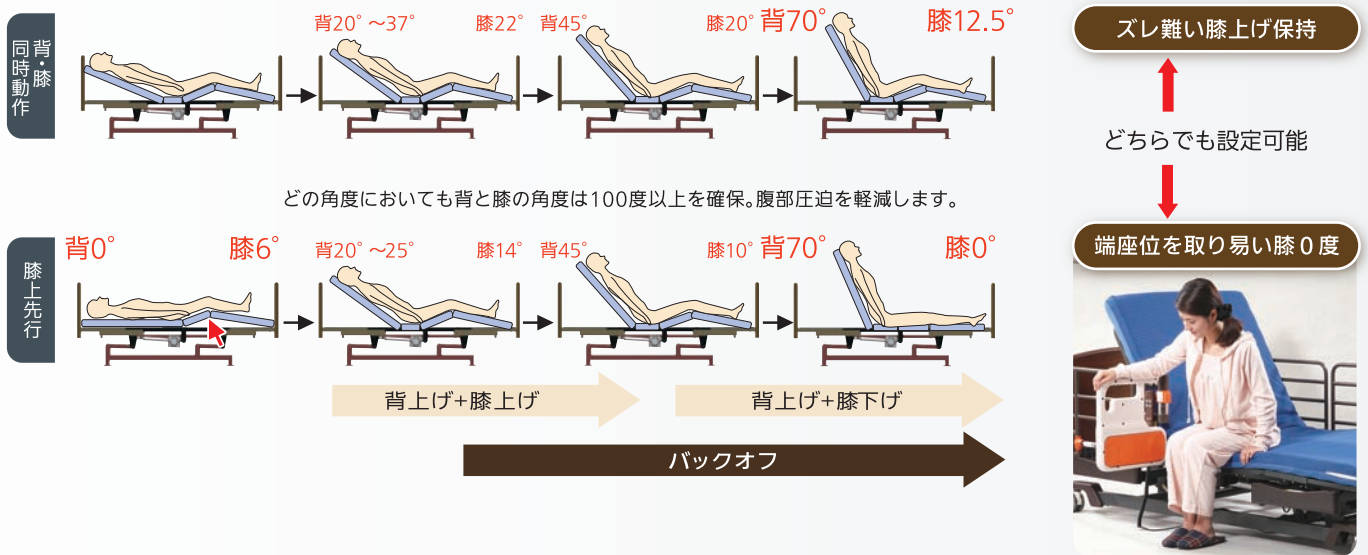

バックオフ機能付 対応機種:全機種


背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

※自分で体を動かす事ができない人のみ背圧が発生します。

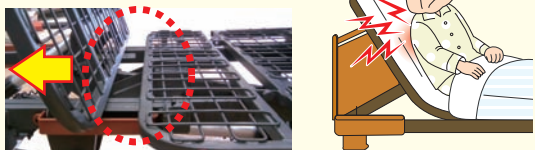


Point 3 安全への配慮

事故が起きにくい安心の隙間設計です。

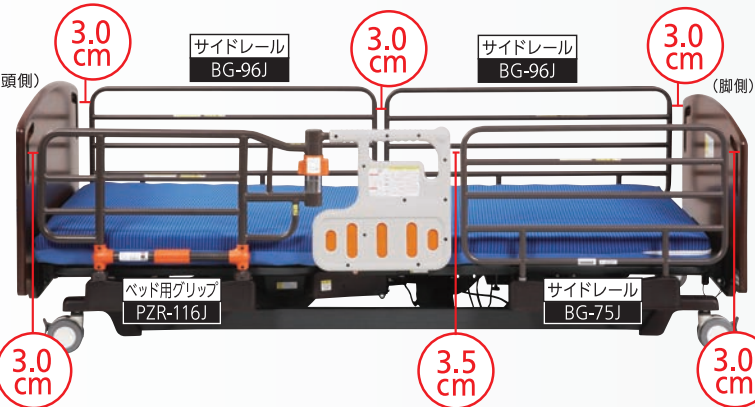

スイング式レールホルダー

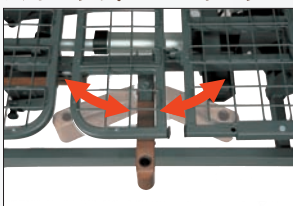

収納を忘れた場合でも左右に動くため、足をぶつけてもケガをしにくい設計です。

4輪ロック付きキャスター




ロックしやすい様にボード形状をカット。足先のケガへの配慮です。

目指したベッドです。

Point 4 低床25cmから63cmの床面高さ。

- 身長の低い方から立ち上がり易い高さに設定できます。
- 壁から5cm(壁が足元の場合は7cm)離れた場所で設置をお願いします。

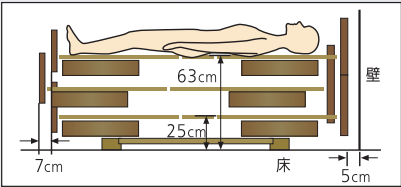

対応機種:3モーター/2モーター

機種

○ダークブラウン

施設用3モーターベッド

キャスター仕様

PKB-AS3FAC メーカー希望小売価格 409,500円(税込)

固定脚仕様

PKB-AS3FA メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)

施設用2モーターベッド

キャスター仕様

PKB-AS2FAC メーカー希望小売価格 378,000円(税込)

固定脚仕様

PKB-AS2FA メーカー希望小売価格 340,000円(非課税)

施設用背上げ1モーターベッド

キャスター仕様

PKB-AS1FAC メーカー希望小売価格 315,000円(税込)

固定脚仕様

PKB-AS1FA メーカー希望小売価格 280,000円(非課税)

○ライトブラウン

施設用3モーターベッド

キャスター仕様

PKB-AS3FBC メーカー希望小売価格 409,500円(税込)

固定脚仕様

PKB-AS3FB メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)

施設用2モーターベッド

キャスター仕様

PKB-AS2FBC メーカー希望小売価格 378,000円(税込)

固定脚仕様

PKB-AS2FB メーカー希望小売価格 340,000円(非課税)

施設用背上げ1モーターベッド

キャスター仕様


PKB-AS1FBC メーカー希望小売価格 315,000円(税込)

固定脚仕様


PKB-AS1FB メーカー希望小売価格 280,000円(非課税)

仕様

3モーター/2モーター

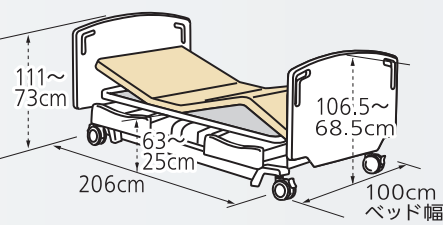

背上げ1モーター

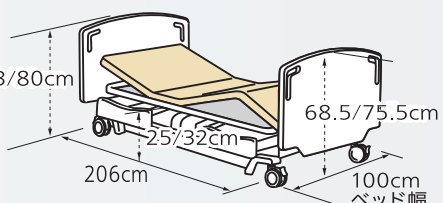

キャスター仕様と固定脚仕様の寸法は同じです。

材質	本体:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:プリント紙化粧板
背角度	0~70度
膝角度	0~17度(3モーター)、0~22度(背上げ1モーター、2モーター)
床面高	3モーター、2モーター:25~63cm 背上げ1モーター:25/32cmの2段階 (組立時)(オプションで46cmまで設定可能)
マットレス適合寸法	幅88~91cm
最大使用者体重	120kg
質量	3モーター:94.0kg、2モーター:93.0kg、背上げ1モーター:91.5kg キャスター仕様の場合:各+1.6kg
電源	100V 定格消費電力 120W(背上げ1M:70W)
梱包	5梱包(固定脚仕様は4梱包)
原産国	本体:ベトナム、木部:中国、モーター部:ドイツLimoss社中国工場

その他のオプションはP23~30をご覧ください。

制菌性・防虫・高弾性に優れ、硬さを選べるポリエステルマットレス

医療・介護の現場から生まれた次世代型マットレス
ダブルポイントマットレス

医療の現場で求められる耐久性、クッション性、そして制菌性、どれも無視することのできない重要な課題です。
プラッツのダブルポイントマットレスは、これらの要素に「人へのやさしさ」をプラスしてお応えします。



中綿をポリエステル100%のメッシュ生地で包み込み保護していますので取り扱いがラクです。



ハード 1 当社比
ハード 2 当社比

難燃 防臭 防虫 防ダニ 制菌 MRSA 抗菌加工

ダブルポイントマットレス
■TAISコード/00631-000027 ■JANコード/4539940060325
PFM-8980PN
メーカー希望小売価格
45,000円(税抜) 47,250円(税込)

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。
■材質／表地・芯地:ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量／7.5kg
※非課税のベッドと同時に購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

自然の力の防ダニ加工

青森ひばのコーティングにより感染やアレルギーの元になるダニが寄り付きません。

■防ダニ性(忌避率テスト)(中身:ポリエステルクッション材)

忌避率(%) = $\frac{\text{未加工試料の生存ダニ数} - \text{加工試料の生存ダニ数}}{\text{未加工試料の生存ダニ数}} \times 100 = 95\%$


◎供試ダニ:ヤケヒョウヒダニ・Dermatophagoides pteronyssinus(東京女子医大系)

2層構造と体圧分散効果



2層構造により、好みの硬さを選べます。
片側4cm厚のリバーシブルタイプ!

体圧分散データ

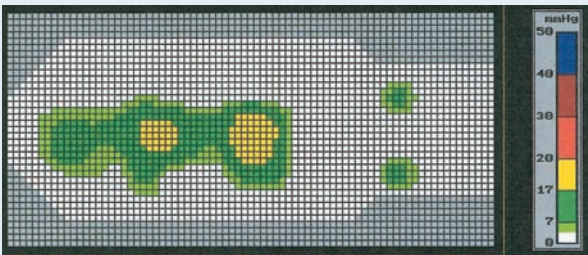

柔らかい面では適度な体圧分散性
能もあります。床ずれ予防にお役立
てください。

柔らかい面、体重49kg
(体重50kg以上になると
体圧分散効果は低下します。)


耐久性と
クッション性

従来のポリエステルとは違い、繊維構造の交錯点に優れ安全性を持たせた「高融点ポリエステル」を採用しました。これにより、耐久性、クッション性、通気性の基本性能を格段にアップし、優れたマットレスへと進化しました。

耐久性

伸縮性に優れたエラストック・ポリマーで、交錯点をアメーバ状に固定しています。そのため、外からの圧力に対して交錯点が劣化しにくく、弾力性を長く保つことが出来ます。

耐久テスト後の比較(800g/cm²×360回圧縮後)

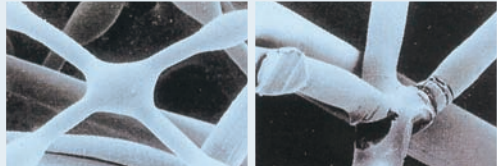

ポリエステルクッション材 硬わた

通気性

立体的な構造であることが特徴なため、空気や水蒸気の通る隙間を持っています。しかも、適度な硬さで、荷重に対する抵抗力を保つので、圧力がかかっても立体構造の隙間を維持します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m ³	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
通気性 cc/cm ² ・sec	130	115	3	JIS L-1079

制菌への
対応

青森ひばのひば油に含まれる天然物としては極めて優れた抗菌性を有する「ヒノキチオール」をコーティング。これにより、MRSA、緑膿菌、大腸菌の増殖を抑え、かつ感染の原因にもなるダニが寄り付かないマットが誕生しました。

■MRSA試験結果(側地 ポリエステルニット生地)

試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステルニット生地 先染め	600以下	4.1以上	1.4以上
綿標準白布 接種直後	1.5×10 ⁴	—	—
綿標準白布 18時間後	8.1×10 ⁶	—	—

検査No.CK-21545-2

■緑膿菌試験結果(クッション材)


試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	2.2×10 ⁴	2.9	0.0
綿標準白布 接種直後	2.4×10 ⁴	—	—
綿標準白布 18時間後	1.7×10 ⁷	—	—

検査No.CK-46629-2

注*:界面活性剤(Tween80)を添加した試験菌懸濁液を使用
試験方法:JIS L1902、菌液吸収法 生菌数/生きている菌の数
静菌活性値/抗菌防臭加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、標準布に対する抗菌防臭加工品の生菌数の差。

CWDX (CenterWeightDeluxe)

長座位、端座位、立ち上がりなどベッドマットレス中央部の体圧がより大きくかかる部分は、高密度な高融点ポリエステルのクッション材を間に挟めた構造になっております。そのため、どのような圧力にも柔軟に対応しヘタリにくく、当初の形態を長く保つことができます。

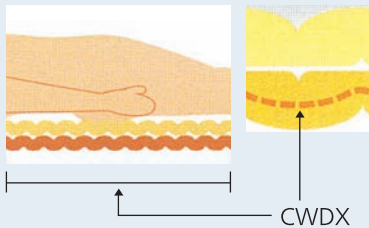

弾力性

ポリエステル短繊維が立体的に交錯し、安定した形で固着されているため、従来の不織布や硬わたに比べ、繊維の結びつき方が強く、しなやかで、外からの圧力にも柔軟に対応します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m ³	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
弾力性 圧縮回復率%	63	46	48	75%圧縮時の 仕事量回復力
圧縮応力比	4.0	3.4	2.5	65%応力/ 25%応力

■MRSA試験結果(クッション材)

試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	2.5×10 ⁴	2.6	0.0
綿標準白布 接種直後	2.3×10 ⁴	—	—
綿標準白布 18時間後	9.8×10 ⁶	—	—

検査No.CK-46629-2

■大腸菌O157:H7試験結果(クッション材)


試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	7.3×10 ³	3.5	0.4
綿標準白布 接種直後	2.0×10 ⁴	—	—
綿標準白布 18時間後	2.5×10 ⁷	—	—

検査No.CK-46629-2


殺菌活性値/制菌加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、接種菌数に対する制菌加工品の生菌数の差。
(財)日本化学繊維検査協会 生物試験センター

ムレにくい防水カバーを採用した
床ずれ防止マットレス「ビカム・ドライⅡ」

異なる素材の3層構造により、広範囲の体圧分散と
適度の弾力性を確保した新世代の床ずれ予防マットレス。

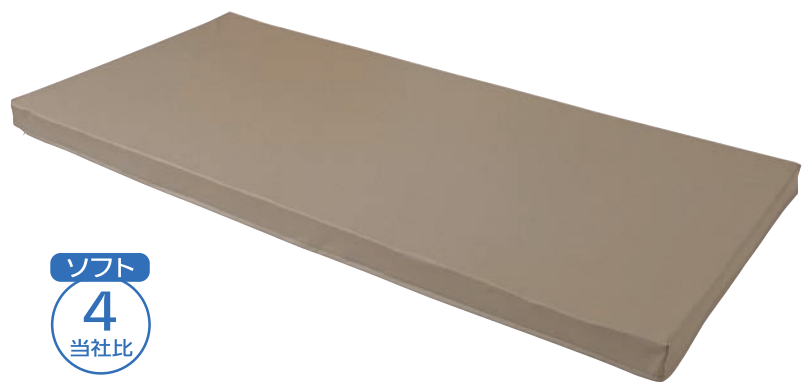


- 難燃
- 防臭
- 防虫
- 防ダニ
- 制菌
- MRSA 抗菌加工

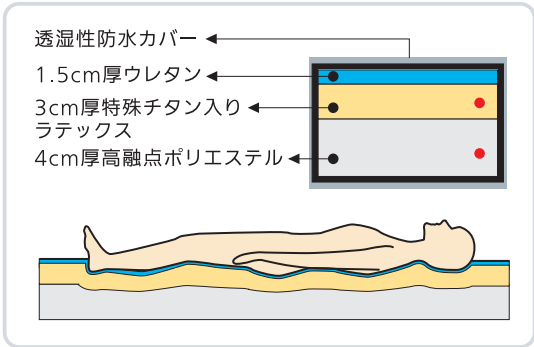

体圧分散性能 3層構造による優れた体圧分散性能と高反発素材ラテックスによる「寝返り」のしやすさを実現。


- 適応体重範囲: 30~85kg
- 高反発素材ラテックスにより体圧分散に優れています。(注1)
- ラテックスとポリエステルにより端座位の体位を安定させます。

注1: 体圧分散だけを求めれば単一の軟材で良いですが、体の沈み込みがあると体位変換がしづらく、ADLを下げる一因にもなります。(ADL=日常生活動作)

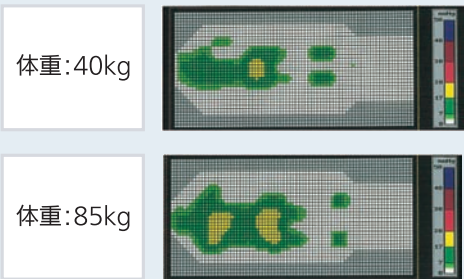

透湿性防水カバー ムレにくい清拭タイプの全面透湿性防水カバーを採用。

- 耐アルコール性により薬液で拭くだけの雑菌処理。

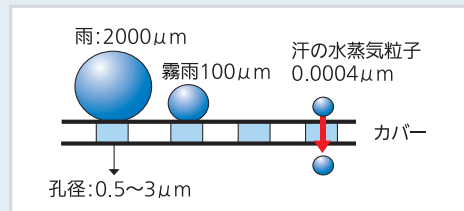

雑菌繁殖を抑制 透湿性でもマット内部の雑菌繁殖を抑えます。

- ビカム・ドライⅡには紫外線を当てなくても触媒作用がある「特殊酸化チタン Z-TiO α 」を配合しています。これにより、マット内部に侵入した雑菌の繁殖を抑え、臭いを分解します。(実用新案出願中)

ビカム・ドライⅡ マットレス

■TAISコード/00631-000103 ■JANコード/4539940060622

PFM-LD90Ⅱ


メーカー希望小売価格 76,650円(税込)

■材質/外カバー:ウレタン・ポリエステル、芯地:ラテックス・ウレタン・ポリエステル
■寸法/幅90×厚さ8.5×長さ191cm ■質量/8.5kg

※「床ずれ防止/体圧分散マットレス」は非課税ベッドと同時購入の場合でも課税となります。

ニューポイントマットレス

通気性に考慮したポリエステル製の
介護用マットレス「ニューポイントマットレス」

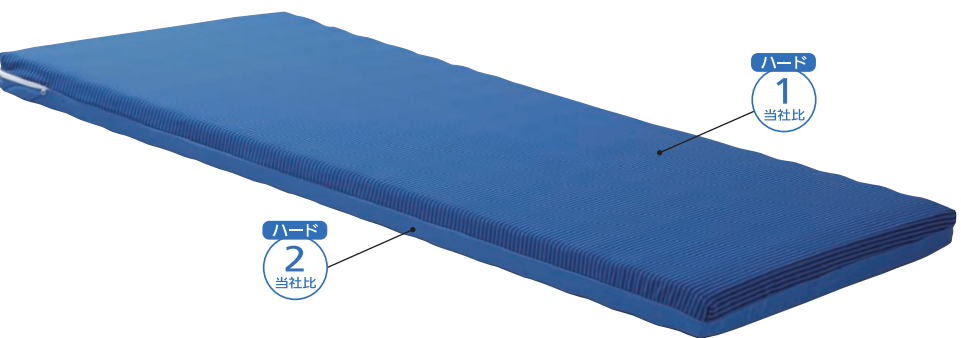

硬さが選べ
背圧を軽減する2層構造



2層構造により、
好みの硬さを選べます。
片側4cm厚の
リバーシブルタイプ!

背上げの際に発生する「背圧」は、
背ボトムとマット、マットと人の間
の摩擦により発生しますが、背上げ
時に、2層のマットがずれる事でこ
れを軽減します。

芯地のポリエステルにも
抗菌剤が練り込まれています。

- 難燃
- 抗菌
- 防臭
- 防虫
- 防ダニ

■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684

PKM-9080

■TAISコード/00631-000177 ■JANコード/4539940060738

PKM-9080S

メーカー希望小売価格 44,000円(税抜) 46,200円(税込)

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。

■材質
外カバー:ポリエステル
内カバー:ポリエステル
芯地:ポリエステル

■寸法
PKM-9080 幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/7.5kg
PKM-9080S 幅90×厚さ8×長さ182cm ■質量/7.0kg

※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

スタンダードマットレス



背圧を軽減する2層構造



- 難燃
- 抗菌
- 防臭
- 防ダニ

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060691

PKM-E80BR


メーカー希望小売価格 32,000円(税抜) 33,600円(税込)

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。

■材質/外カバー:ポリエステル、芯地:ポリエステル
■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/6.2kg

※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」(JIS認証品)

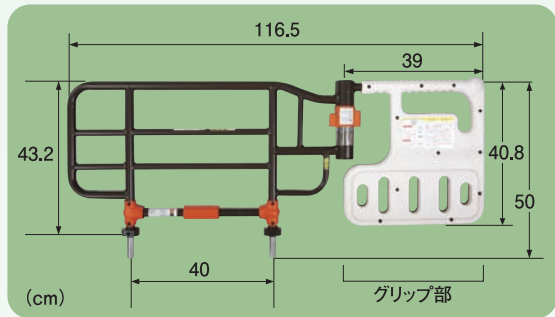


2011年1月 発売開始


立ち上がる時にグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。
この様な事故を防止する為、「ニーパロ」には45度毎にグリップ部を自動的に固定する自動ロック機構を搭載しました。(特許出願中)



1 ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式

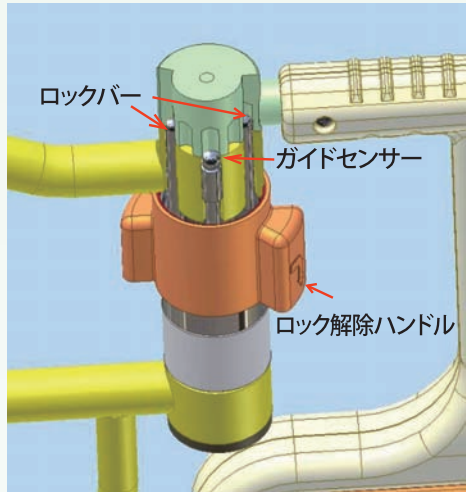

「ロック解除ハンドル」で固定状態を解除し、グリップ部を動かすと45度ごとに自動的にロックする機構を搭載しています。

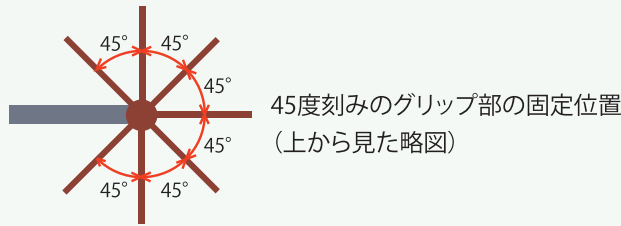


※「ロック解除ハンドル」を下げた解除状態のままにすると、45度でロックされず、任意の位置に廻すことが可能です。

2 使いやすさは安全への第一歩




親指や手のひらによる解除方法例

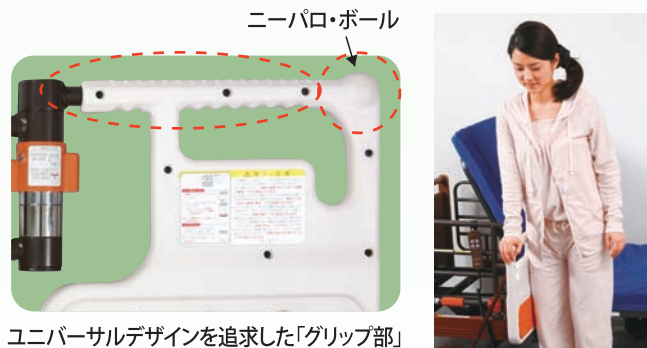

どこからでも握りやすいように先端に球形デザイン
取っ手に波型デザインを採用。

3 事故が多い縦の隙間は全機種3.5cm以下、もしくは24cm以上に設計された安心の隙間寸法。

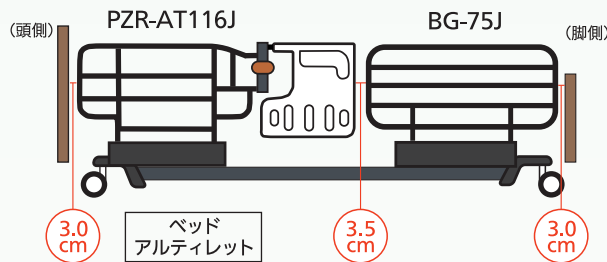

4 回転レバーと下からも固定できるダブルロック方式。下からのネジ留めにより抜ける心配がありません。



自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」

■TAISコード/00631-000179 ■JANコード: 4539940081634

PZR-AT116J メーカー希望小売価格 51,450 円(税込)


■材質/スチール・亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
■質量/9.7kg

ニーパロ専用オプション「移乗してわかる安心ひざパッドニーパロ・パッド」

「安心ひざパッド」は佐賀大医学部 松尾准教授との共同で開発した商品で、ベッドから車いす、ポータブルトイレへの移乗をより「安全・安心」「スムーズ」に行うことができる「ニーパロ」専用オプションです。(特許出願中)



安心ひざパッド装着時

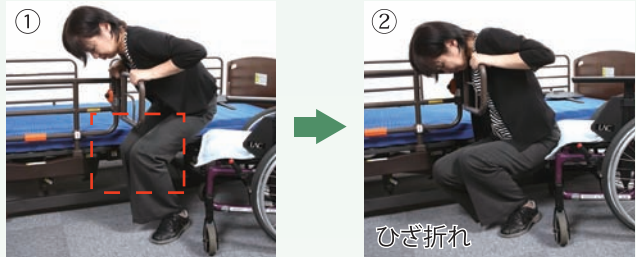

従来のベッド用グリップを使った移乗では、写真①のように膝が前方向にズレ落ちると写真②のように危険な状態になる事もありました。(ひざ折れ状態)

これに対し、「安心ひざパッドニーパロ・パッド」を使うと



- 膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。
- 立ち上がる時は、写真のように膝をパッドにあて、腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で臀部を持ち上げることが可能となります。
- 移乗の途中でズボンを脱ぐなど、立位状態を保持したい時も、腕・膝・足の3点で身体を支える為、腕への負担が減り立位状態が安定しやすくなります。




- 移乗用具(スライディングシート/トランスファーボード)を使用する際も、「ひざ折れ」の心配が無く、安心して使用できます。
- 介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。

ニーパロ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J メーカー希望小売価格 3,780 円(税込)

■材質/ EVA ■寸法/350 x 130 x 33(厚み) mm

安全カバー付ベッド用グリップ

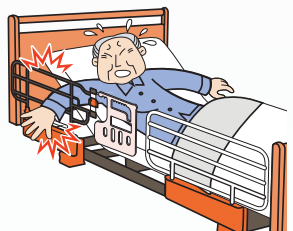

痺れている腕は感覚も鈍くなっています。
挟んでいる事に気づかず背上げすると骨折することがあります。
安全カバーで予防して下さい。

※カバーだけのお求めは
ベッドグリップ用セーフティネット
PZRSN-AT116J ¥7,875(税込)



■TAISコード/00631-000180 ■JANコード: 4539940081641

PZR-AT116JSN メーカー希望小売価格 ¥59,325(税込)

サイドレール(JIS認証品)

テーブル・キャスター・アジャスター・その他周辺機器

ロングサイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000150 ■JANコード/4539940081399

メーカー希望小売価格 **14,000円(税抜)**

14,700円(税込)

■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅96×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000168 ■JANコード/4539940081528

メーカー希望小売価格 **27,000円(税抜)**

28,350円(税込)

■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅97×高さ52cm

※カバーのみ BGSN-96J(2枚組) ¥13,650(税込)

サイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000151 ■JANコード/4539940081405

メーカー希望小売価格 **10,000円(税抜)**

10,500円(税込)

■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅75×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

安全カバー付 サイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000167 ■JANコード/4539940081535

メーカー希望小売価格 **23,000円(税抜)**

24,150円(税込)

■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅76×高さ52cm

※カバーのみ BGSN-75J(2枚組) ¥13,650(税込)

ショートサイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000152 ■JANコード/4539940081412

メーカー希望小売価格 **10,000円(税抜)**

10,500円(税込)

■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅59×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

■TAISコード/00631-000166 ■JANコード/4539940081542

メーカー希望小売価格 **23,000円(税抜)**

24,150円(税込)

■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅59.5×高さ52cm

※カバーのみ BGSN-53J(2枚組) ¥13,650(税込)

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

レールに腕を入れて
背上げを行うと
腕を骨折する
可能性があります。

安全カバー付サイドレールに
することで左記の様な
事故を防ぎます。
メッシュ構造により、
視野の妨げを軽減します。

※旧タイプのPZR-116J、PZR-K900TAG、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000用もご用意しております。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

使い勝手にこだわったベッドテーブルです。

ガス圧式昇降ベッドテーブル


■TAISコード/00631-000178 ■JANコード/4539940081627

PZT-840

メーカー希望小売価格 **39,900円(税込)**

- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動が楽なキャスター付
- ストッパー付キャスター(2個)

■材質
フレーム部: スチール製+合成樹脂(ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS)
木部: 合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)
■寸法/幅84×奥行47×高さ60~84cm(天板)/幅84×奥行40×厚み1.8cm
■質量/15.5kg
■天板の耐荷重/10kg
■原産国/ベトナム(ガススプリング: 日本製)

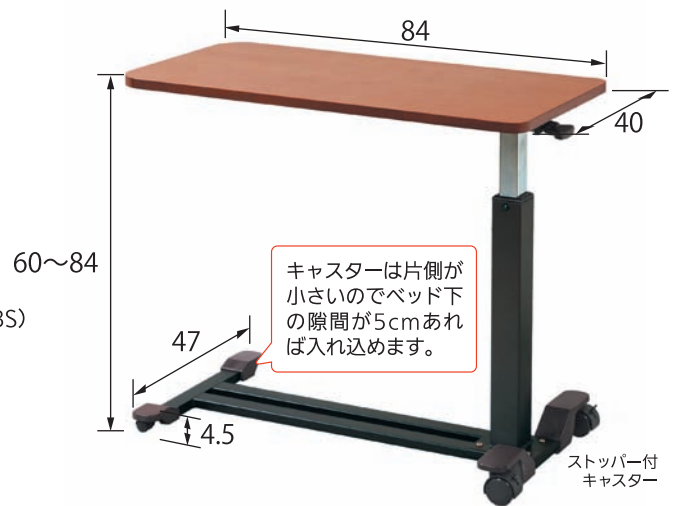

注意:「ミオレット」と組み合わせる場合は、ハイトスペーサーが必要です。(キャスター装着時は不要)
「アルティレット」と組み合わせる場合は3.5cmの延長脚が必要です。

Miolet 背上げ1モーター専用
キャスター(4個組)

■TAISコード/00631-000158 ■JANコード/4539940081450

(ストッパー付) (ストッパー無し)

M1RJ8-8CKS

メーカー希望小売価格 **16,800円(税込)**

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール
■寸法/径7.5cm
■仕様/対角ストッパー、ダブルロック
■装着時床面高/33.0/36.5/40.0/43.5cm
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

Miolet/Ulilet 背上げ1モーター専用
延長脚

写真は7cm
延長脚です。

高さ調節用14cm延長脚(4個組)

PDP-140G ■JANコード/4539940081368

メーカー希望小売価格 **3,465円(税込)**

高さ調節用7cm延長脚(4個組)

PDP-70G ■JANコード/4539940081375

メーカー希望小売価格 **3,465円(税込)**

高さ調節用3.5cm延長脚(4個組)

PDP-35G ■JANコード/4539940081382

メーカー希望小売価格 **3,465円(税込)**

Miolet/Ulilet 専用
オーバーテーブル

■TAISコード/00631-000121 ■JANコード/4539940081245

胸元部分をカットした使いやすいラウンドタイプ

PGT-400LM

メーカー希望小売価格 **10,500円(税込)**

■材質/プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂
■寸法/幅100.3×奥行35.8cm、
厚み: 取手部分4.1cm・テーブル部2cm
※適合機種: ミオレットシリーズ(P13~P18)
アルティレットシリーズ(P19~P22)

Miolet 専用周辺商品(背上げ1モータータイプを除く全機種)

全機種

装着拡大写真

Miolet 専用キャスター(4個組)

■TAISコード/00631-000154 ■JANコード/4539940081436

M2RJ-8CKS

メーカー希望小売価格 **17,850円(税込)**

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■装着時床面高/29~63cm
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

装着拡大写真

Miolet 専用ハイトスペーサー(4個組)

■TAISコード/00631-000157 ■JANコード/4539940081443

M2RJ-H35-A

メーカー希望小売価格 **6,300円(税込)**

■材質/ポリプロピレン ■装着時床面高/28.5~62.5cm
※Mioletシリーズにベッドテーブルをご利用の際は当該商品が必要となります。

使用例

床キズ防止カーペット(4枚組)

■JANコード/4539940081283

PSC-1216SC

メーカー希望小売価格 **3,150円(税込)**

■材質/ナイロン100%
■寸法/16.5×12.5cm(厚さ5mm)
防炎、防汚、裏面滑り止め加工